

ELEGANZA 5

LINET

Segurança que fala por si




Leito de terapia intensiva

ELEGANZA 5

SEGURANÇA QUE FALA POR SI

A cama de cuidados intensivos Eleganza 5 foi projetada para reduzir o esforço, prevenir quedas e otimizar o fluxo de trabalho com tecnologias avançadas, para que sua equipe possa fazer o que faz de melhor: prestar cuidados excepcionais.

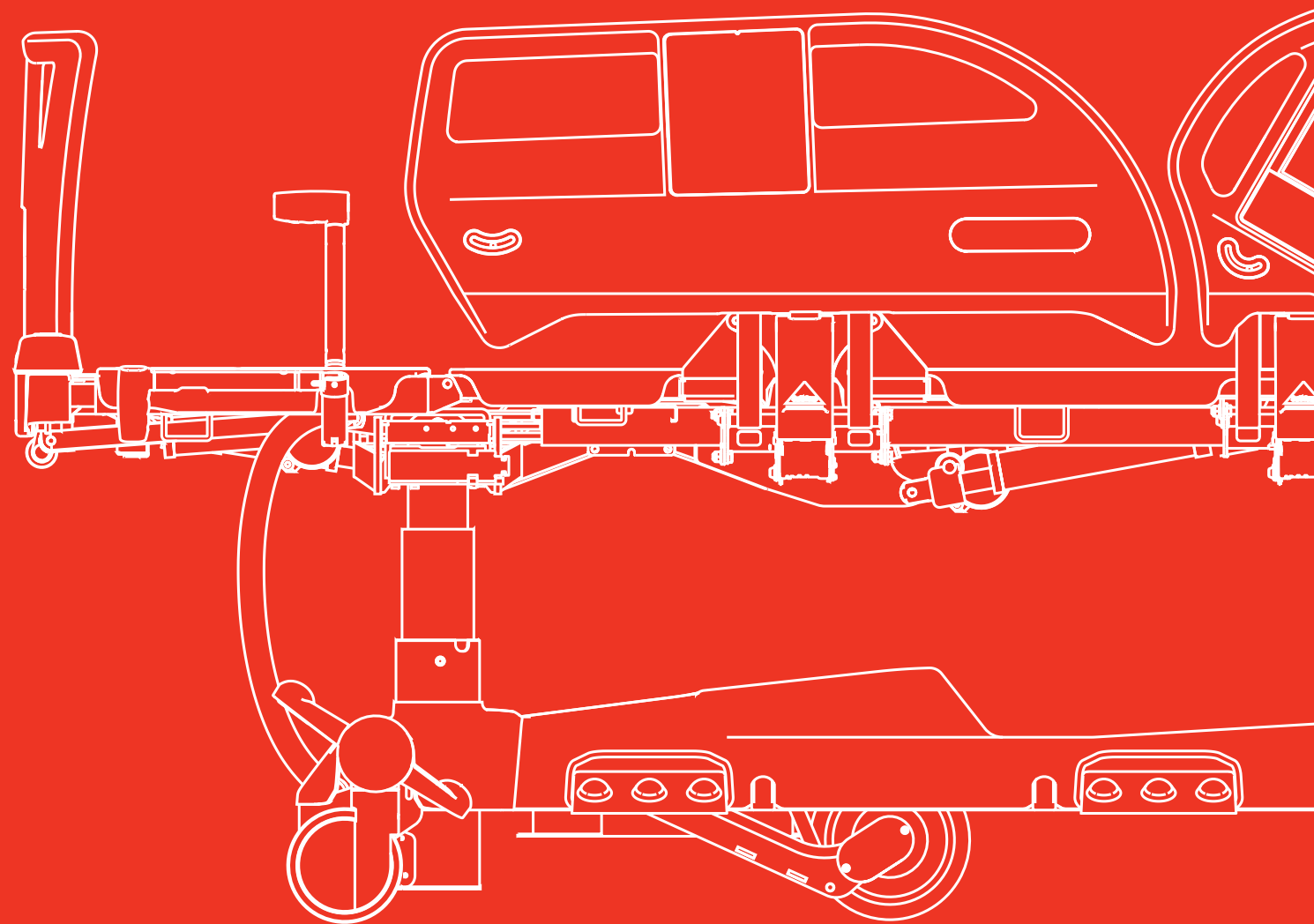

INCLINAÇÃO LATERAL REVOLUCIONÁRIA BASEADA EM ESTRUTURA PARA REDUZIR O ESFORÇO DO CUIDADOR



O manuseio mais seguro do paciente reduz o esforço do cuidador em **67 %**, diminuindo o risco de LER.¹



A transferência mais fácil do paciente requer **33 %** menos esforço físico graças à inclinação lateral.²



A mobilização precoce, por si só, pode reduzir significativamente a permanência no hospital em um dia.³



O posicionamento preciso é possibilitado por uma inclinação lateral a cada 1° para micromudanças suaves e precisas.


SEGURANÇA INTELIGENTE QUE APOIA CADA MOVIMENTO



O Alarme de Saída da Leito Multizona monitora o paciente e notifica a equipe quando um paciente tenta sair da cama.



A orientação por voz integrada e os indicadores LED lembram os pacientes de permanecer na cama e ajudam os cuidadores a encontrar rapidamente a cama correta antes de uma queda.

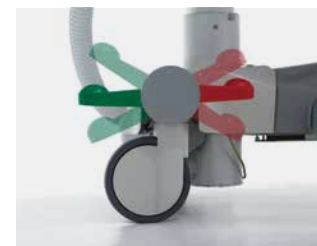

O sistema de travagem automática i-Brake® é ativado automaticamente para reduzir o risco de quedas de uma cama instável.



O i-Drive Power® reduz o esforço físico com suporte motorizado, facilitando o transporte do paciente.

INTEGRAÇÃO INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DO PACIENTE E CUIDADOS COM A PRESSÃO



O SafetyPort coleta e visualiza dados da cama e do paciente em tempo real, aumentando a segurança e a eficiência.



O SmartTracking facilita o trabalho diário dos profissionais da saúde, rastreando os ativos do hospital ou os pacientes.



A integração do colchão Opticare® aumenta o conforto com a manutenção do microclima e a conectividade perfeita da estrutura da cama para um cuidado mais silencioso e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELEGANZA 5

Carga de trabalho segura	250 kg
Peso máximo do paciente	185 kg
Peso médio da maca	210 kg
Dimensões externas na posição padrão da cama (comprimento× largura)	219 cm (86,2 pol.)× 100 cm (39,4 pol.)
Posição de Trendelenburg/Trendelenburg reverso	+14° / -14
Ajuste da inclinação lateral	+15° / -15°
Extensão da cama	0 cm (0 pol.) – 22 cm (8,7 pol.)

AMPLA VARIEDADE DE COLCHÕES



VIRTUOSO

Apresenta tecnologia de alternância de 3 células para proporcionar pressão zero por meio do esvaziamento cíclico das células. Um ciclo de 7,5 minutos apoia o movimento natural do corpo para maior conforto e cuidado.



OPTICARE

Colchão terapêutico projetado para imersão e envolvimento ideais, com recursos avançados como manutenção de microclima para maior conforto do paciente.

REFERÊNCIAS

1. LINET Report Guide – Effect of lateral tilt on patients turning. 2021

2. LINET internal testing

3. Daum N, Drewniok N, Bald A, Ulm B, Buyukli A, Grunow JJ, Schaller SJ. Early mobilisation within 72 hours after admission of critically ill patients in the intensive care unit: A systematic review with network meta-analysis. Intensive Crit Care Nurs. 2024 Feb;80:103573. doi: 10.1016/j.iccn.2023.103573. Epub 2023 Nov 8. PMID: 37948898.

