

Eleganza 1



Excelente solução por razões econômicas

Eleganza 1





- Ergoframe® reduz a carga de pressão
- Fácil mobilização
- Disponível com vários controles



Paciente

- Função soft drop das grades laterais
- Conceito de limpeza fácil
- Recurso de segurança como extensor ou protetor



Equipe

- TCO baixo – custo total de aquisição
- Cama universal a um baixo custo
- Proteção de sobrecarga



Gerenciamento

Melhor atendimento ao paciente

CONFORTO PARA TODOS

A cama acomoda pacientes hospitalizados com excesso de peso ou mais altos.

- Construção robusta.
- Carga de trabalho segura 180–250 kg.
- Largura da plataforma do colchão de 90 cm.
- Possível extensão da cama em 15 cm.
- Grades laterais de plástico bipartidas com função soft drop.



CONTROLES AO ALCANCE

Vários controles claros e fáceis de usar estão imediatamente à disposição do paciente.

- 1** **Controle Portátil**
para controlar as posições da cama também pode vir com um teclado iluminado.
- 2** **O painel de controle de satélite**
vem em um braço flexível e é de fácil acesso, os botões são gravados para pacientes com deficiência visual.
- 3** **Controles nas grades**
são fáceis de usar e estão sempre à mão.





O SISTEMA ERGOFRAME®

estende a plataforma do colchão na região pélvica e reduz a carga de pressão nos tecidos dessa região quando o paciente é posicionado na cadeira cardíaca.



MOBILIZAÇÃO MAIS FÁCIL

A plataforma do colchão é equipada com um suporte integrado que auxilia na mobilização do paciente.




Segurança em primeiro lugar

GRADES LATERAIS SEGURAS

A cama pode ser equipada com função soft drop das grades laterais de plástico bipartidas. A segurança das grades laterais de plástico bipartidas é garantida por um sistema de dois movimentos de destravamento independentes.

- Os controles de grade lateral ¾ única são localizados ergonomicamente, pela primeira vez, na parte superior da grade lateral.
- As grades laterais são abaixadas através da função soft drop que aciona uma mola a gás para suavizar o efeito do movimento da grade.

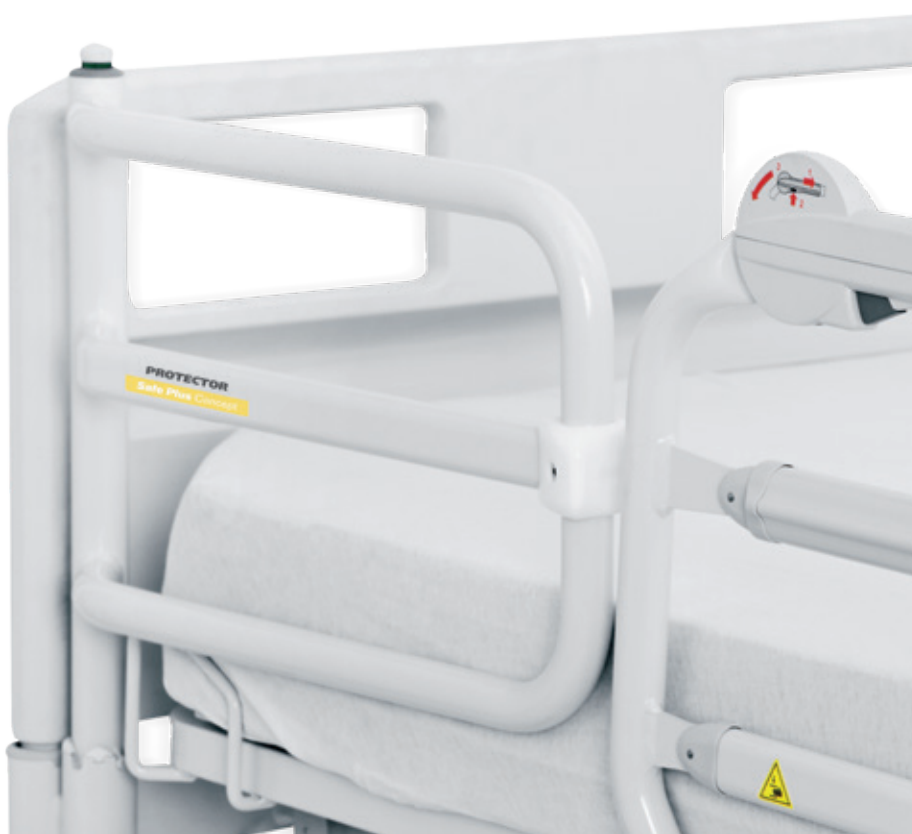

O PROTETOR ÚNICO

O uso do Protetor possibilita proteção em todo o comprimento da plataforma do colchão. O Protetor está localizado na extremidade dos pés da cama e está ligado a uma única grade lateral desmontável tanto em termos de dimensões como de design.





MELHOR PROTEÇÃO

Em alguns casos, é apropriado fornecer ao paciente um nível mais alto de proteção. Uma peça de extensão fácil de montar aumenta a altura da grade lateral em 10 cm. O extensor é especialmente recomendado ao usar um colchão ativo - até 26,5 cm de altura.

BOTÃO GO

o botão verde 'GO' aciona a unidade de controle da cama por um período de 3 minutos a partir da última vez que foi pressionado.



Conceito de limpeza fácil



PLATAFORMA DO COLCHÃO DE PLÁSTICO

A plataforma do colchão consiste em oito peças de plástico removíveis separadas e é feita para tornar a higiene da cama muito fácil e rápida.

TECNOLOGIA JOINT-FREE

A tecnologia mais recente é usada durante a fabricação de peças individuais para minimizar o espaço onde infecções indesejadas podem se esconder.

CONCEITO DE ESPAÇO SEGURO

Prevenção de esmagamento.

Equipe simpática



5° RODÍZIO

O 5° rodízio acionado facilita a transferência por longos corredores. Ao criar um ponto de inflexão no meio da cama, permite curvas fechadas, proporcionando também uma redução significativa na força necessária para virar a cama.



PAINEL DE CONTROLE DO SUPERVISOR

O painel possui um cabo em espiral que proporciona flexibilidade de movimento e operação da cama a partir de uma posição ideal.



PAINEL CENTRAL DE CONTROLE

O painel para o controle e desativação das funções está localizado sob a extremidade dos pés e está integrado na estrutura da cama.




CONTROLES DOS PÉS

Os controles permitem o ajuste prático e fácil da altura e da posição de exame. Eles são equipados com um protetor mecânico contra acionamento acidental.

Eleganza 1 Extra SEGURANÇA

ZONA SEGURA PARA PACIENTES

O Eleganza 1 Extra SEGURANÇA oferece um alto padrão de qualidade hospitalar. Graças às modificações, é adequado para departamentos específicos, como psiquiatria, hospital prisional, saúde mental, etc.

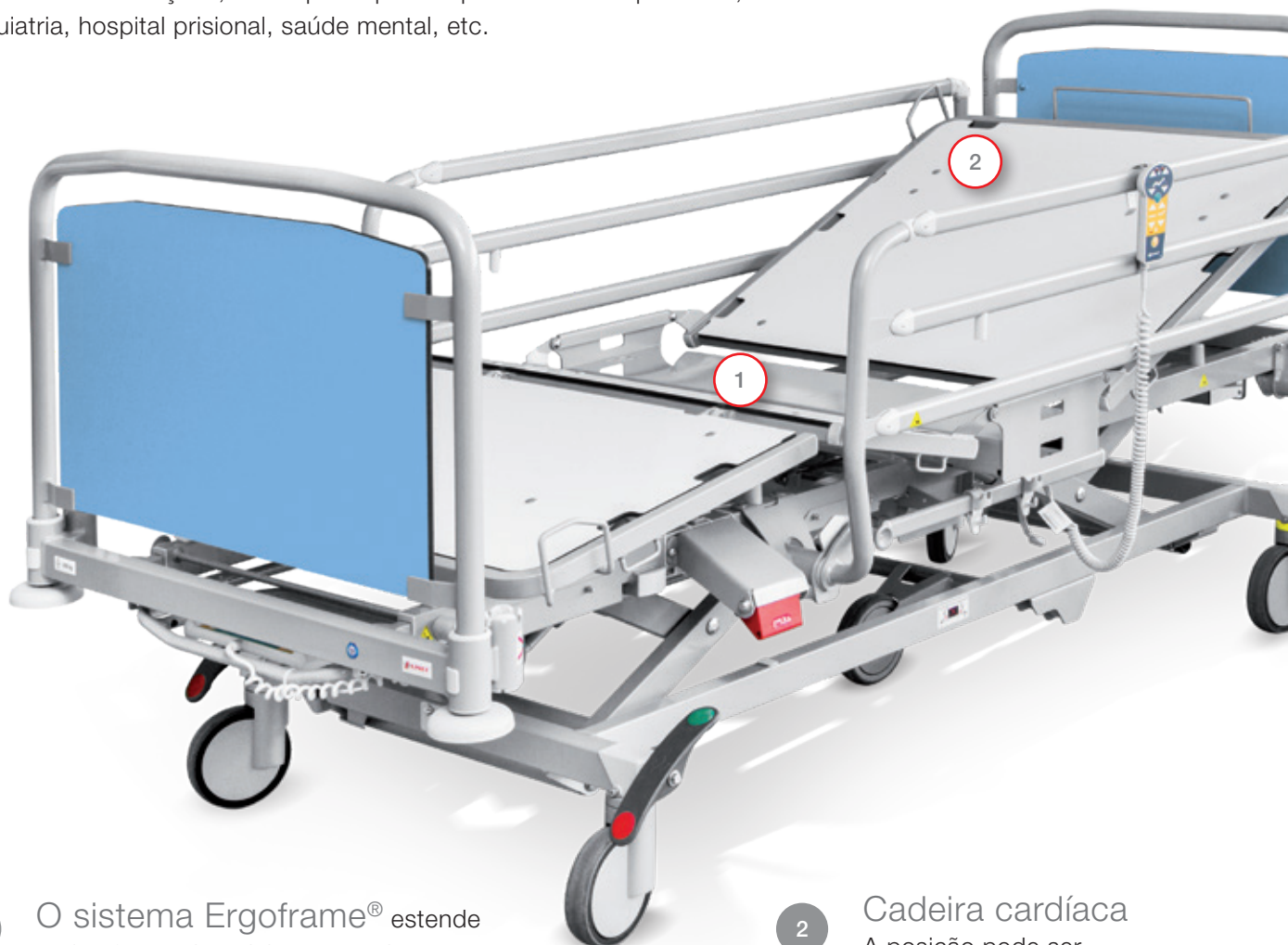

1

O sistema Ergoframe® estende a plataforma do colchão na região pélvica e reduz a carga de pressão nos tecidos dessa região quando o paciente é posicionado na cadeira cardíaca.

2

Cadeira cardíaca
A posição pode ser definida pressionando um único botão.

Equipamento básico de Eleganza 1 Extra SEGURANÇA*

A plataforma do colchão fixa inclui	Conector 'plug & play' do aparelho do paciente
Extremidades fixas do tubo	Bateria reserva
Recursos fixos	Painel de supervisão com funções de cadeira cardíaca, TR e ATR pressionando um único botão
Painel de supervisão integrado na prateleira forrada	Proteção do cabo de alimentação em uma caixa de bloqueio

* Ao contrário da versão padrão do Eleganza 1

A



PEÇAS FIXAS

A cama inteira e seus painéis são firmemente instalados e as partes da plataforma do colchão também são fixas. Todas as partes menores da cama, como os ganchos da barra de acessórios, estão presas.



PROTEÇÃO DE CABOS

O cabo de alimentação está escondido em uma caixa com chave fácil e prática (chave Segufix).



CHAVE SEGUFIX

O Segufix é compatível e o operador não precisa de nenhuma chave adicional.



VERSÃO FIXA

Uma cama em versão sem rodízios pode ser fixada ao chão.

Eleganza 1 LE

VERSÃO ECONÔMICA

A construção da cama Eleganza 1 LE é a mesma do modelo clássico Eleganza 1: elevação, carga máxima, material rodante incluindo todas as versões de rodízios e freios, plataforma do colchão e extremidades. Também com grades laterais dobráveis simples ou grades laterais de plástico bipartidas. A unidade de controle da cama é mais simples.





A versão simplificada da cama Eleganza 1 LE oferece alta funcionalidade a um preço mais acessível.

- Caixa de controle universal 100–240 V.
- A cama pode ser equipada com um aparelho plug & play.
- 1 alavanca de CPR mecânico (possível atualização para 2 alavancas padrão).



CONTROLE DA CAMA

O Eleganza 1 LE está equipado com uma unidade de controle mais simples, de forma que a cama pode ser controlada por um único aparelho. Um simples aparelho controla o posicionamento elétrico e a configuração de altura.

- Com travamento mecânico.
- 8 ou 10 botões (dois botões para inclinar para a posição TR/ATR).



Uma versão mais acessível da cama elétrica não inclinável.

Detalhes práticas

1

Extremidades da cama removíveis

pode ser fixado à estrutura da plataforma do colchão com travas excêntricas simples.

2

Amortecedores de canto horizontais protegem a cama.

3

Plataforma do colchão

é facilmente removível e lavável e é compatível com colchões de 86 ou 90 cm.

4


prateleira forrada

também pode ser usado para armazenar o painel do supervisor.

5

RCP mecânica

– opção adicional para uso urgente de RCP elétrica

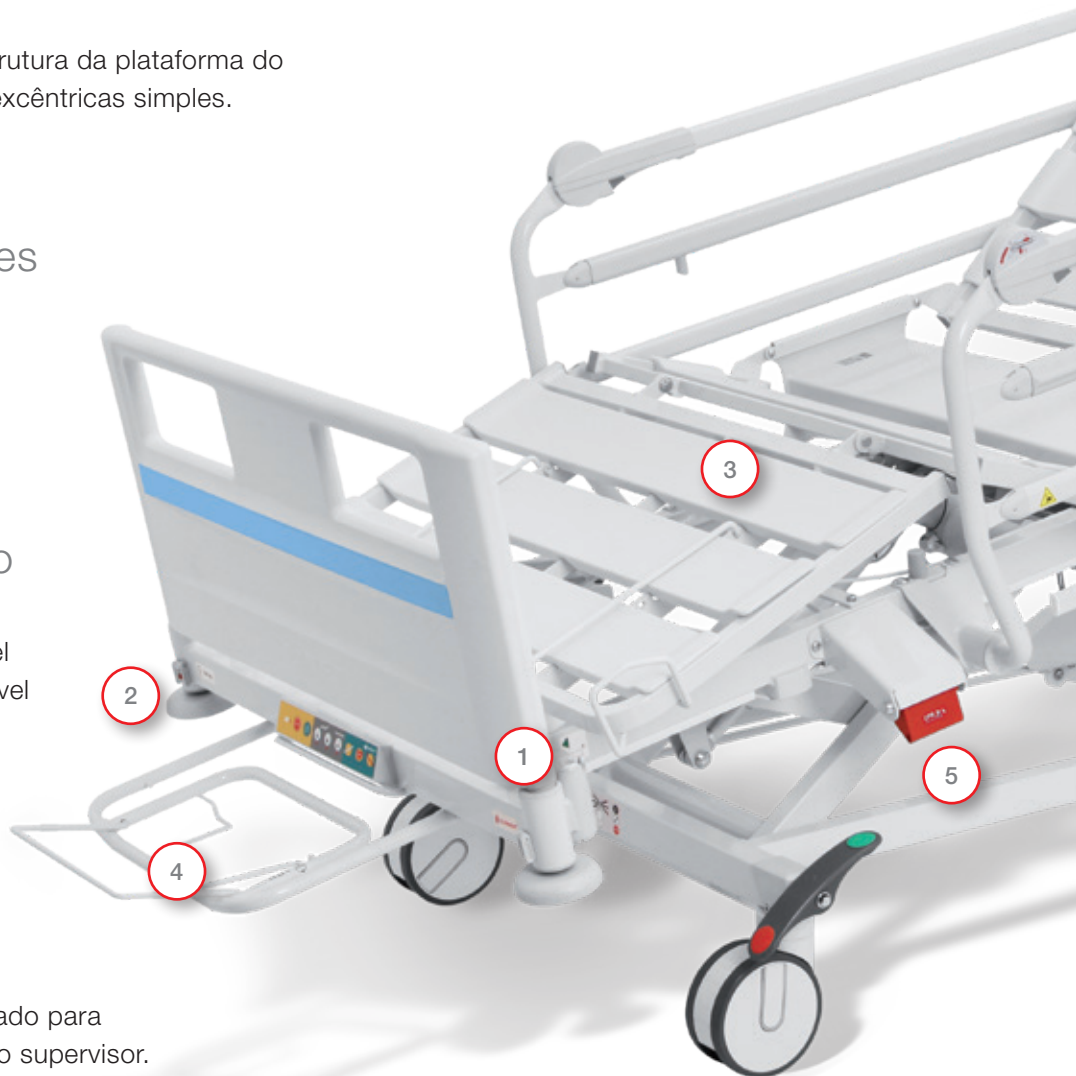



OPÇÕES DE CORES

O design prático, modesto e muito atraente da cama Eleganza 1, juntamente com uma ampla gama de efeitos de cores, cria um ambiente hospitalar agradável e moderno.



Carga de trabalho segura

Rodízios		Bateria	
Dimensões	Travamento	Sem bateria	Com bateria
125 mm	travado individualmente	185 kg	
	Travado centralmente	200 kg	250 kg
150 mm	Travado centralmente		

Parâmetros técnicos

	Rodízios	
	125 mm	150 mm
Dimensão externa	218 × 99 cm	
Extensão da cama	15 cm	
Plataforma do colchão	4 seções, elétrica ajustável	
Dimensões da plataforma do colchão	200 × 90 × 14 cm	
Ajuste elétrico da altura	37 – 73.5 cm	39,5 – 76 cm
Ajuste elétrico do apoio das costas	0 – 70°	
Ajuste elétrico do descanso da coxa	0 – 35°	
TR/ATR	15° – 15°	
Ergoframe®	9 + 7 cm	
Peso da cama (conforme especificado)	135 kg	
Padrão	IEC: 60601-2-52	
Proteção contra água e poeira	IPx4	
Proteção de sobrecarga	Sim	
Espaço para servidor	16 cm	18,8 cm

Eleganza 1

Paciente

- Ergoframe® reduz a carga de pressão
- Fácil mobilização
- Disponível com vários controles



- Função soft drop das grades laterais
- Conceito de limpeza fácil
- Recurso de segurança como extensor ou protetor



Equipe

Gerenciamento

- TCO baixo – custo total de aquisição
- Cama universal a um baixo custo
- Proteção de sobrecarga



LINET

Members of LINET Group

LINET DO BRASIL

Al. Santos, 787 - cj 32 | São Paulo – SP | Brazil

tel: +55 11 3284 8404 | e-mail: info_brasil@linet.com | www.linet.com

